


## Podłoże montażowe FluoreGuard (zestaw twardy)

**Opis:** FluoreGuard Mounting Medium (Hard Set) jest rozpuszczalnym w wodzie podłożem przeznaczonym do półtrwałego nakrywki preparatów fluorescencyjnych. FluoreGuard wysycha do półsztywnej warstwy, która eliminuje uszkodzenia tkanek spowodowane przesuwaniem się szkiełek nakrywkowych i ułatwia długotrwałe przechowywanie. Formuła (Hard Set) zapewni lepsze suszenie w wilgotnych warunkach.

**Zastosowania/ograniczenia:** Nie należy przyjmować wewnętrznie.  
Do diagnostyki in vitro.  
Zastosowania histologiczne.  
Nie używać, jeśli odczynniki stają się mętne.  
Nie używaj przeterminowanej daty ważności.  
Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z odczynnikami.  
Niesterylne.

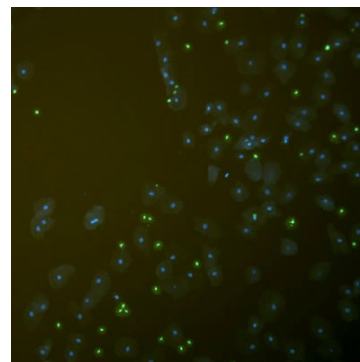

**Informacje dotyczące zamawiania i aktualne ceny w**  
[www.scytek.com](http://www.scytek.com)

<b>Dostępność:</b>	<u>Przedmiot #</u>	<u>Głośność</u>
	FMH030 powiedział:	30ml Zakraplacz
	FMH060 powiedział:	60ml Zakraplacz
	FMH500	Pojemność 500ml
	FMH999 powiedział:	1000ml


**Składowanie:** Przechowywać w temperaturze 18-25°C.


**Środki ostrożności:** Unikać kontaktu ze skórą i oczami.  
Działa szkodliwie po połknięciu.  
Przestrzegaj wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych przepisów dotyczących utylizacji.

### Procedura:

1. Nałóż kilka kropli FluoreGuard Mounting Medium (Hard Set) i szkiełko nakrywkowe.
2. Pozostaw FluoreGuard do wyschnięcia na 30 minut przed view. Produkt wyschnie do postaci półstałej przez noc.
3. FluoreGuard jest podłożem wodnym i można go usunąć przez namoczenie w PBS przez noc.

### Odwołania:

Przechowywanie: 18°  
C  25° C


 Laboratoria ScyTek, Inc.  
205 Południe 600 Zachód  
Logan, UT 84321  
Stany Zjednoczone Ameryki


 



Emergo Europa  
ul. Molenstraat 15  
2513 BH Haga, Holandia

1. Wanninger S, Donati M, Di Francesco A, Hässig M, Hoffmann K, Seth-Smith HM, Marti H, Borel N. Ciśnienie selekcyjne sprzyja odporności na tetracykliny Chlamydia Suis u tuczników. PLoS jeden. 2016 28 listopada; 11(11):E0166917.

Przechowywanie: 18°  
C  25° C



Laboratoria ScyTek, Inc.  
205 Południe 600 Zachód  
Logan, UT 84321  
Stany Zjednoczone Ameryki



EC REP

Emergo Europa  
ul. Molenstraat 15  
2513 BH Haga, Holandia